


Marshall Visionary®

Andningsballonger för engångsbruk

Marshall Visionarys engångs andningsballonger har hög kvalitet och ett förmånligt pris. Ballongerna finns för vuxna, barn och spädbarn.

- N1LOC® låssystemet låser fast syrgasslangen till andningsballongen, ett krav för enheter som administrerar läkemedel under tryck.
- Ballongerna är de första på marknaden som uppfyller European Research Councils krav gällande tidalvolym.
- Ballongerna för barn och spädbarn innehåller en 40 cm H₂O säkerhetsventil, vilket förhindrar risken att lungorna överfylls.
- Mönstrad yta gör den lätt att greppa vid alla tillfällen.
- Genomskinlig envägsventil.
- Ballongen kan vridas 360° vilket underlättar användandet med ansiktsmask eller endotracheal tube.
- Förmonterad och klar att användas.

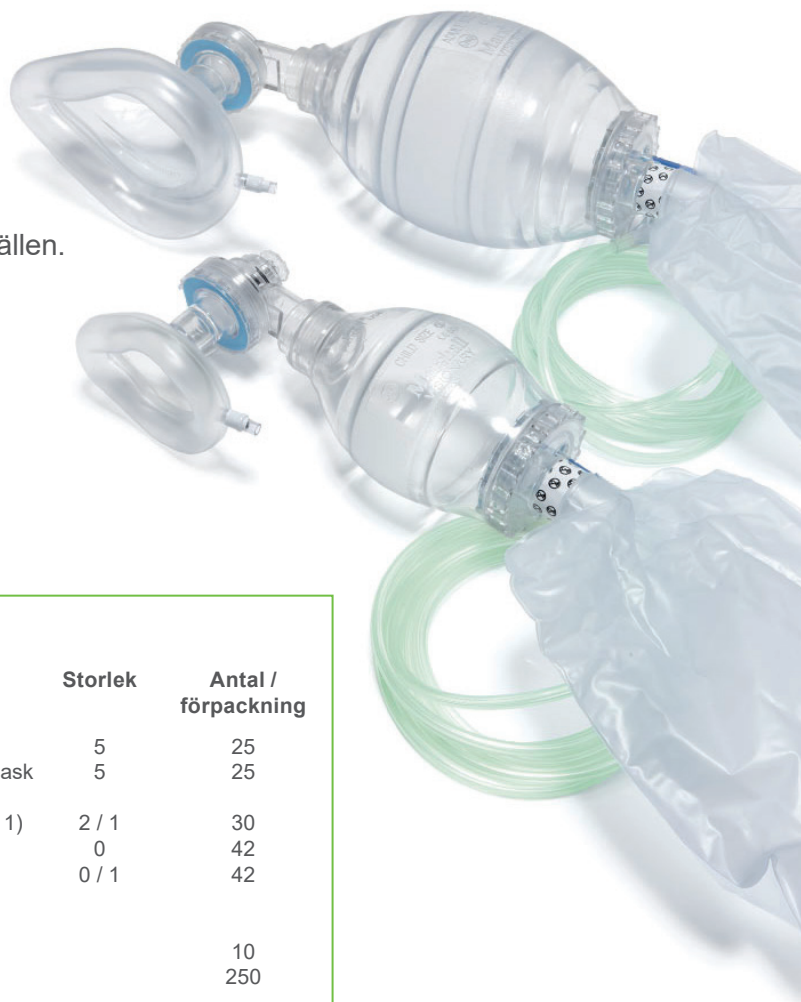

Beställningsinformation

Produkt-nummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
130500	Andningsballong för vuxna inkl. manschettmask	5	25
130599	Stor andningsballong för vuxna inkl. manschettmask	5	25
140505	Andningsballong för barn inkl. manschettmask (strl 2) och silikonmask (strl 1)	2 / 1	30
150505	Andningsballong för spädbarn inkl. silikonmask	0	42
150505ETI	Specialanpassad andningsballong för neonatal användning inkl. mask (strl 0) och (strl 1)	0 / 1	42
101110	PEEP-ventil, återanvändbar		10
101120	PEEP-ventil, för engångsbruk		250
101100	Syrgasslang för vuxna och för barn, för engångsbruk		10
101101	Syrgasslang för spädbarn, för engångsbruk		10
101102	Syrgasslang, 3 m, för engångsbruk		10

Alla set innehåller en syrgasslang, reservoarpåse och mask.

when outcomes matter

Steripolar

Tel. 018-430 0980

| info@steripolar.se

| www.steripolar.se