

# Hygieniska patientkuddar

Sleep Angel® patientkuddar



## Steripolar

Taking care further

Förhindrar infektionsspridning


Minskade kostnader

Ökad patientsäkerhet

# Användning av SleepAngel®-kuddar ökar patientsäkerheten och minskar kostnader

Virus, allergener eller andra patogener kan inte tränga in i fyllningen av SleepAngel-kuddar, och ytmaterialet är helt vätsketätt.

## PneumaPure™-filtret garanterar att SleepAngel®-kuddarna är säkra

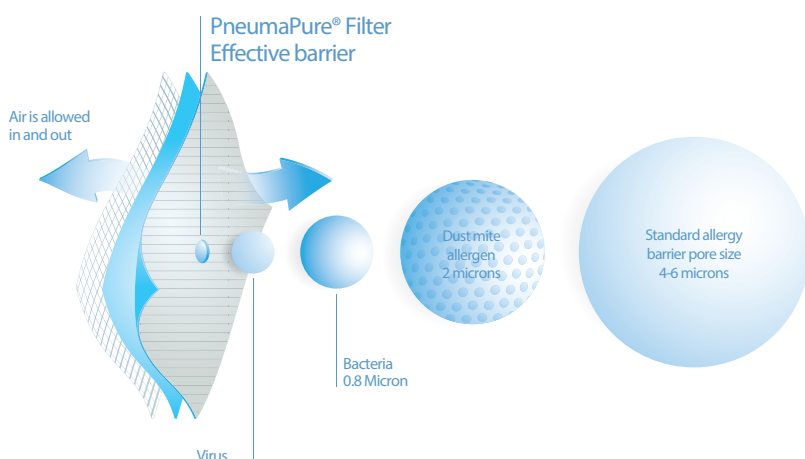

Alla SleepAngel®-produkter är försedda med ett patenterat PneumaPure™-filter. Filtret släpper in och ut luft ur kudden, men hindrar vätskor och smittämnen såsom MRSA, Norovirus, C.diff., E.coli att ta sig in i kudden.

SleepAngel®-produkterna är enkla att rengöra och desinfektera med en trasa.

När produkterna rengjorts är de snabbt och säkert tillgängliga för nästa patient.

## Övergång från vanliga kuddar till SleepAngel®-kuddar ger betydande besparingar

Kuddarna ger betydande besparingar på tvätt- och personalkostnader.

Kuddarna kan rengöras och desinficeras på enheten.


Endast en SleepAngel®-kudde behövs per säng, vilket sparar utrymme och minskar hanteringen av kuddar.

SleepAngel®-kuddens livslängd är avsevärt längre än en vanlig kudde, vilket har en positiv inverkan på miljön.

Att slippa kostnader för tvätt och kuddhyrning beräknas halvera driftkostnaderna under kuddarnas livslängd (två år).



# Vanliga kuddar kan bidra till infektionsspridning

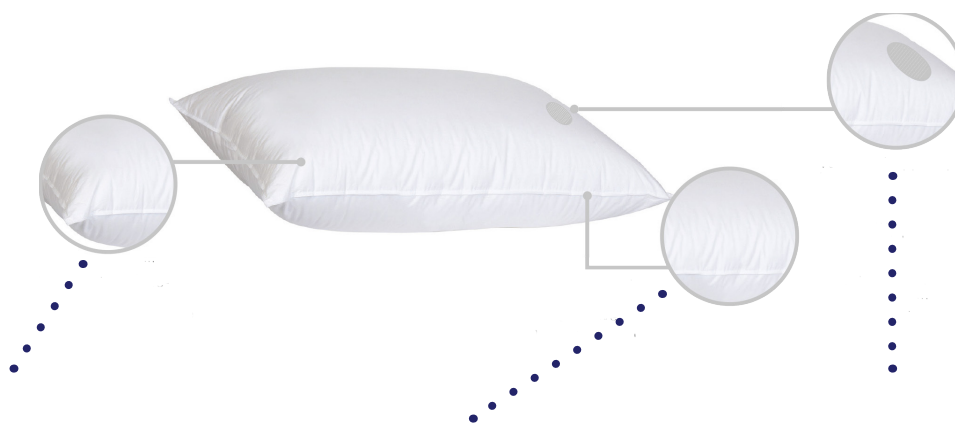

## Överdrag som inte andas

Kuddar utan skyddslager kan låta bakterier som finns i kudden tränga in i öron, ögon, näsa och mun på patienten.

## Sydda sömmar

När sömmar sys gör nålen hål i tyget. Hålen är över 100 större än skadliga patogener som tar sig in i kudden.

## Öppningar och dragkedjor

Öppningar och dragkedjor kan inte samtidigt både gå att öppna och hålla tätt. Luftöppningar innebär en risk då luft kommer in och ut ur kudden vilket kontaminerar kuddens insida.

# SleepAngel®-kuddar är utformade för patientens bästa



## Överdrag

Överdraget är tillverkat av högkvalitativt, mjukt och svalt polyuretantyg som är vattenfast och inte släpper igenom smittämnen.

## Sömmar

Svetsade sömmar, utan nålhål, för extra skydd.

## Filter

Det patenterade PneumaPure™-filtret låter luft komma in och ut ur kudden utan att släppa in bakterier, virus, allergener och mögel.

## SleepAngel® – Teknisk specifikation

- CE-märkta klass I medicintekniska produkter.
- Brandsäkerhetsklass enligt europeisk standard SLI.
- Överdraget består av ett multi-stretch polyuretanklätt tyg. Tyget är svalt, tåligt och vattentätt. Tygmaterialet består på utsidan av 100% polyuretan och på insidan av 100% polyamid.
- Fyllningen i kuddarna med polyesterfiber är PrimaLoft® Bio™-fiber, som är biologiskt nedbrytbart och inte lämnar några mikoplastrester i miljön.
- Lätta att rengöra med rengöringsmedel som finns på vårdenheten. Fläckar kan rengöras med 1 000 ppm aktivt klor.

### SleepAngel® Express patientkudde med polyesterfiberfyllning

Fyllning	100 % silikoniserad polyester (biologiskt nedbrytbart PrimaLoft® Bio™-fiber)
Stödkonstruktion	100 % polyester/värmebehandlad vadd
Storlek	50 x 60 cm
Vikt	800 g
Produktnummer	3010013



### SleepAngel® Express patientkudde med polyesterfiberfyllning

Fyllning	100 % silikoniserad polyester (biologiskt nedbrytbart PrimaLoft® Bio™-fiber)
Stödkonstruktion	100 % polyester/värmebehandlad vadd
Storlek	40 x 60 cm
Vikt	550 g
Produktnummer	3010012



### SleepAngel® Express patientkudde med polyesterfiberfyllning

Fyllning	100 % silikoniserad polyester (biologiskt nedbrytbart PrimaLoft® Bio™-fiber)
Stödkonstruktion	100 % polyester/värmebehandlad vadd
Storlek	40 x 30 cm
Vikt	275 g
Produktnummer	3010061



### SleepAngel® Express patientkudde med memoryskumfyllning

Fyllning	100 % polyuretanmemoryskum
Skumdensitet	45 kg / m <sup>3</sup>
Storlek	50 x 60 x 11 cm
Vikt	1 300 g
Produktnummer	3010018



Medicinteknisk produkt. Tillverkare Gabriel Scietific OÜ.



## Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Färg	Antal / förpackning
3010013	SleepAngel Express patientkudde med polyesterfiberfyllning	50 x 60 cm	Ljusblå	15
3010012	SleepAngel Express patientkudde med polyesterfiberfyllning	40 x 60 cm	Ljusblå	15
3010061	SleepAngel Express patientkudde med polyesterfiberfyllning	40 x 30 cm	Ljusblå	1
3010018	SleepAngel Express patientkudde med memoryskumfyllning	50 x 60 cm	Ljusblå	8

**Steripolar**  
Taking care further

### Steripolar AB

#### Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

[steripolar.se](https://steripolar.se)

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485