

Fekalkatetersystem

SECCO Protect™



Steripolar
Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

SECCO Protect™


SECCO Protect™ är ett slutet system för fekalhantering som förebygger hudskador på grund av diarré samt skyddar vårdmiljön mot avföringskontamination. SECCO Protect™ underlättar rätt placering och skyddar från överfyllning.

Fördelar

- **Omvårdnad:** Hjälper till att förhindra smittspridning för patienter och personal med sitt slutna katetersystem och superabsorberande teknik. Detta resulterar i mindre risk för infektion och spill, samtidigt som den underhålls en hälsosam patientmiljö.
- **Bibehålla:** Upprätthåller större patientkomfort på grund av fördelar med Thinwall-teknik. Secco Protect™ kan minska hudskador och utveckling av trycksår som kan förekomma hos tarmkateterpatienter.
- **Kontrollera:** Kontrollera lukt och förbättra patientens värdighet. Den luktbeständiga beläggningen EasyFlush tillsammans med deodoriserande filter säkerställer en trevligare vårdmiljö samtidigt som det hjälper till att skydda patientens värdighet. Kompletterad med sin 1,5-liters fekalpåse innebär 50% färre ersättningspåsar som krävs.

Egenskaper

- Mjukt katetermaterial i silikon
- Säkerhetsventil som förhindrar överfyllnad av kuff för ökad patientsäkerhet
- Fingerficka som underlättar rätt placering
- Superabsorberande material i fekalpåsen som gör innehållet mer fast vilket minskar risk för spill och kontamination
- Fekalpåse med förslutningslock och som rymmer 1,5 liter
- L-formad swivelanslutning mellan fekalkatater och påse gör systemet följsamt vid förflyttningar
- Filter som avlägsnar lukt

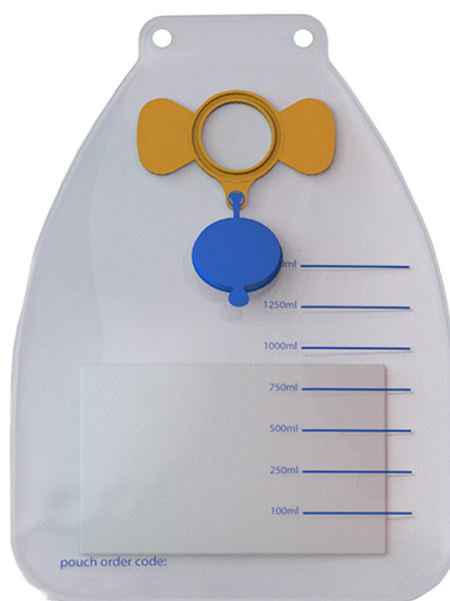


Filter som avlägsnar lukt

1,5 liter uppsamlingspåse med superabsorption



Byt till ett nytt katetersystem med 29 dygns mellanrum.

Säkerhets- och övertrycksventil som skyddar mot överfyllnad

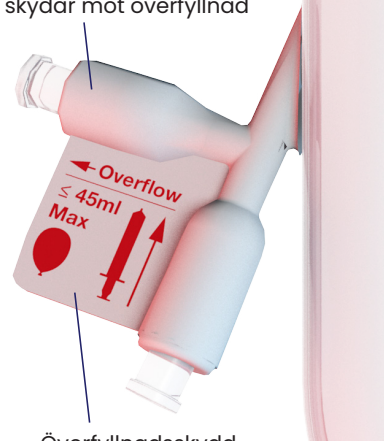


Överfyllnadsskydd

Ökad extra säkerhet som i sin funktion förhindrar patientskador som kan uppkomma vid överfyllning av kuffen. Försök till överfyllning av vatten indikeras av att säkerhetsventilen öppnar och vätskan kan rinna ut och avlastar trycket.


EasyFlush-yta avlägsnar lukt



Hållare för uppsamlingspåsen och hängare

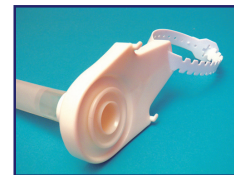

Kateters längd 170 cm

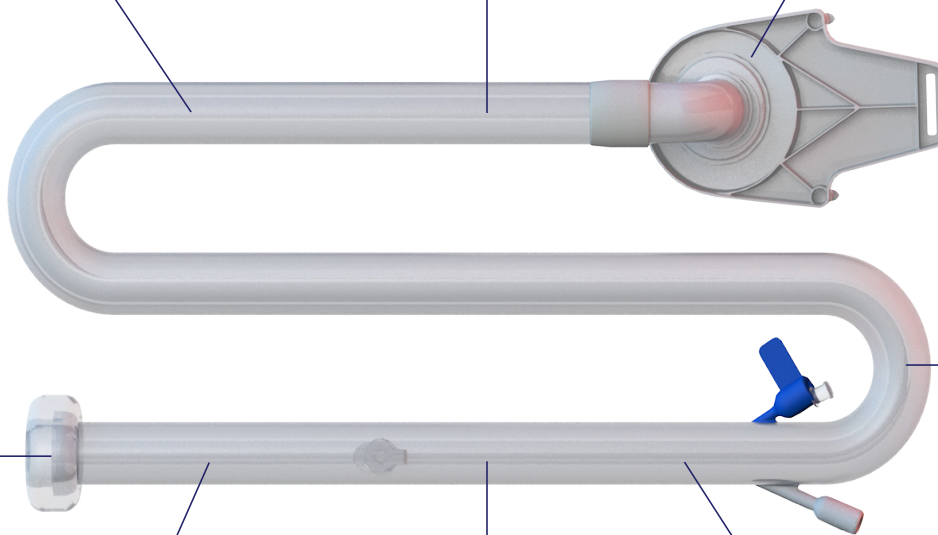


Fingerficka som underlättar applicering




Port för påfyllning



Ventilöppning med röntgenindikator

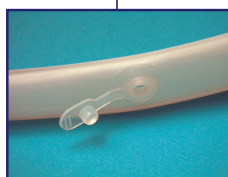

Spol- och provtagninsport

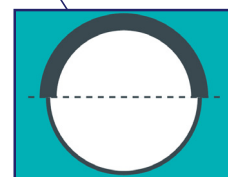

ThinWall-teknik och material som är mjukt och behagligt för patienten



Medicinteknisk produkt. Tillverkare Dahlhausen.

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
5200000150	SECCO Protect™ FMS Set	1
5200000200	SECCO Protect™ FMS uppsamlingspåsar	10

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485