

HotDog

Det tysta patientvärmesystemet



Steripolar
Taking care further


Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

Luftfri värmning av patienter minskar risken för infektionsspridning*

HotDog multifunktionella uppvärmda madrasser och filtar möter behoven hos dagens sjukvård; de sparar kostnader och kan minska risken för infektion. HotDog-systemet är lätt, tyst och behagligt att använda, och viktigast av allt – patienterna älskar det också!

Patenterat värmesystem

Till skillnad från andra värmeprodukter använder HotDog-systemet sig av ett patenterat värmeledande ThermAssure®-tyg. Det tar bort risker i samband med tillförsel av blåsande varmluft i vård- och operationssal. Det ökar patientsäkerhet och bekvämlighet, stör inte det laminära luftflödet på salen och låter mindre.

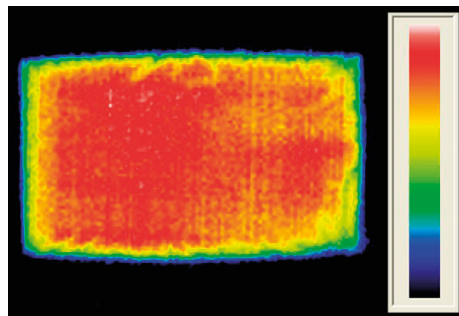

HotDog värmer madrasser med jämn värme över hela ytan. Säkra temperaturer är 35°C–40°C.



Kontrollenhet multiport

WC77 multiport levererar låg spänning (48 VDC) till värmeenheterna och övervakar temperaturen med en mikroprocessor och en temperatursensor av termistortyp. Strömmen från kontrollenheten överförs till täcken och madrasser och värmer genom ledare som löper längs med varje sida. Ledaren överför energi till det värmeledande polymertyget, som värmer patienten kontinuerligt och säkert. Uppvärmning till önskad temperatur går på cirka 3 minuter.

Fyra värmetäcken och en madrass kan kopplas till kontrollenheten samtidigt.

Värmotäcken och madrasser

Ytterhöljet är tillverkat av ett icke-genomsläppligt polyvinylmaterial för att förhindra bakterietillväxt och designad för enkel rengöring. Alla produkter är helt fria från PVC och latex.

Värmotäcken och madrasserna är följsamma och lätta att placera på patienten. Materialet är röntgengenomsläppliga. Vid behov av röntgenundersökning eller genomlysning ska värmotäcken och madrasser placeras så att de inte stör undersökningen. Det med avseende på att endast ledaren längs ytterkanten, sensorn och anslutningskablar är röntgentäta.




*<https://hotdogwarming.com/research/>

Förhindra vårdrelaterade infektioner med HotDog värmemadrasser och värmetäcken med maximala möjligheter


Integrerad utbildning

På skärmen finns det bildspel för utbildning som tydligt hjälper dig att komma igång och lära dig de bästa metoderna.

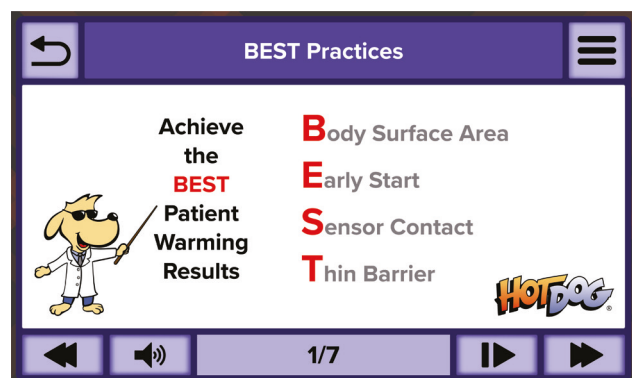


Temperaturövervakning

Samtidig övervakning av patientens temperatur för att automatiskt och optimalt styra patientuppvärmning via täcken och madrass.

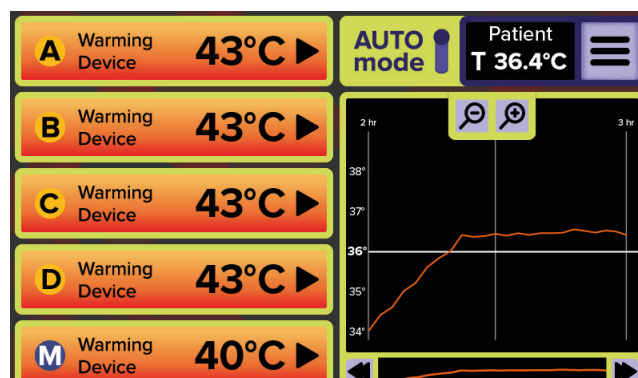


Avancerad temperaturkontroll

På pekskärmen kan du styra varje värmetäcke och madrass individuellt i 1°C i steg, eller alla enheter samtidigt.

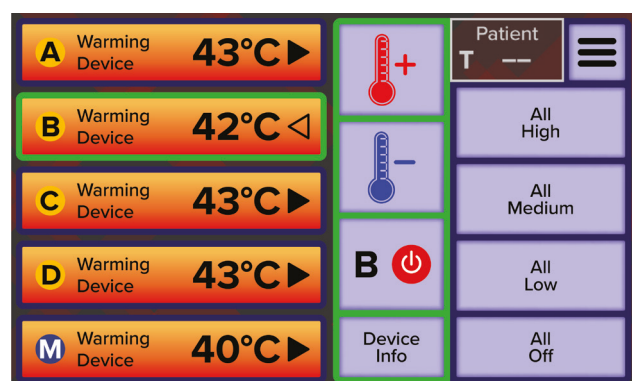

Positioneringsguide

Visuella positioneringsguider som visar lösningar vid flera olika operationer gör användningen mycket enkel.

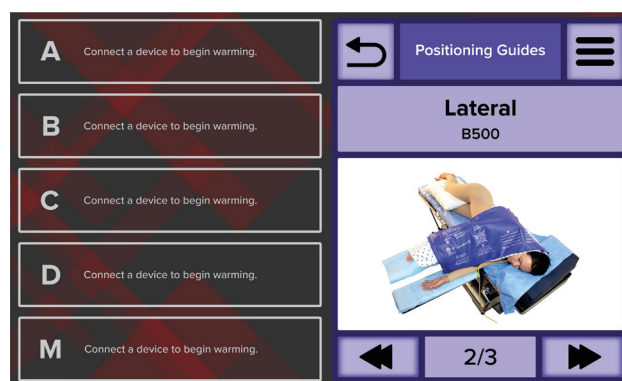

Varma patienter återhämtar sig snabbare

Ett flertal studier visar ett samband mellan temperaturreglering och god återhämtning hos patienter.* Patienter som genomgår anestesi och opereras tenderar att drabbas av en sjunkande kroppstemperatur, framförallt under den första timmen.

Det är känt att en sänkt kroppstemperatur bidrar till risken för ökade rytm- och koagulationsrubbningar, blödningar och infektioner. Följden blir att patienternas återhämtning bromsas upp, vilket förlänger vårdtiden och ökar kostnaderna.

*<https://hotdogwarming.com/research/>



Värmetäcken

Värmetäckena är urformade för att möta alla uppvärmningsbehov. B500 är det mest avancerade och mångsidiga värmetäcket för flera positioneringsalternativ. Det har rundade samt formbara kanter för en mjukare beröring och form. Det innehåller också ett mer flexibelt värmande tyg för bättre patientdrapering och effektivitet.


Det värmande tyget producerar en enhetlig värmeeffekt över hela ytan av värmetäcket. Temperatur kontrolleras mellan 37–43°C.




B500

- Värmetäcke, universal
- B: 43,2 cm x L: 76,2 cm
- Vikt 0,8 kg

Positioneringsalternativ B500

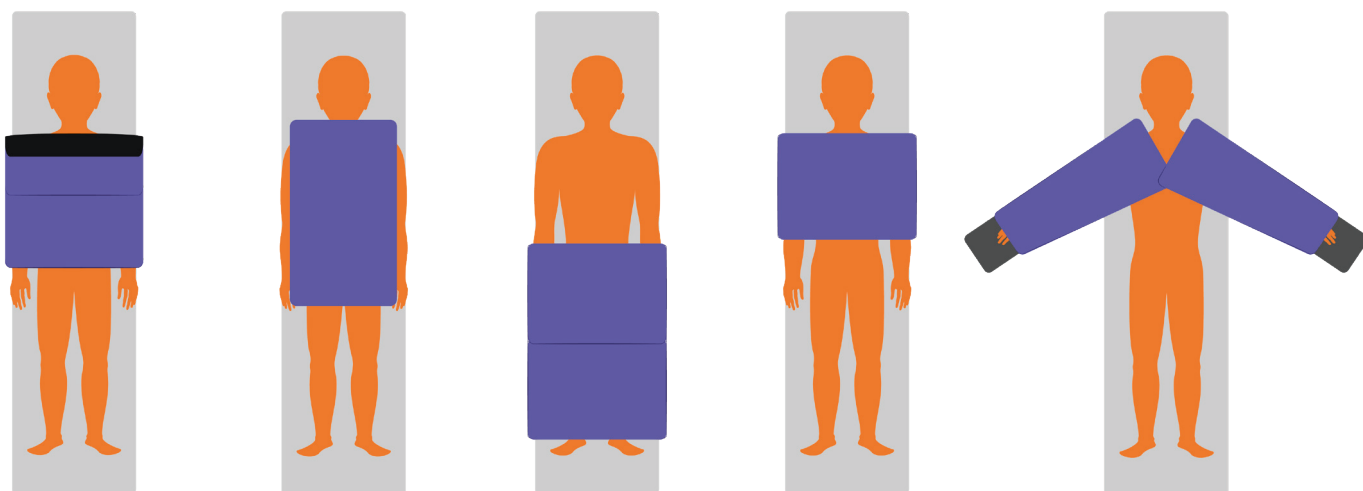


Värmetäcken

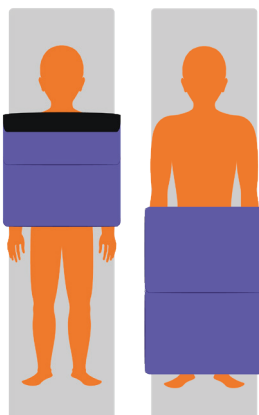

B103

- Värmetäcke, halvkropp
- B: 74,9 cm x L: 98,4 cm
- Vikt 1,36 kg

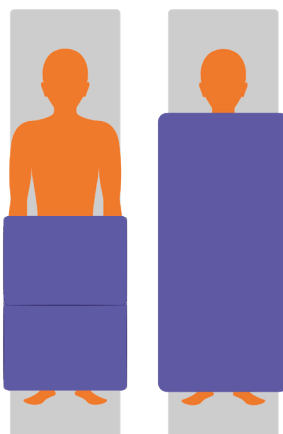

B104

- Värmetäcke, helkropp
- B: 74,3 cm x L: 128,6 cm
- Vikt 1,81 kg



B107

- Huvudvärmare
- B: 19,7 cm x L: 70,5 cm
- Vikt 0,54 kg

Värmemadrasser

Värmemadrasserna är utformade så att de ger en säker placering och uppvärmning under patienten. Temperatur kontrolleras mellan 35–40°C .

Det värmande tyget omsluter ett tryckavlastande skum som ger en jämnt uppvärmd, tryckneutral dyna mellan patienten och operation- eller undersökningsbordet.



U300

- Värmemadrass, Tredelenburg
- B: 74,9 cm x L: 98,4 cm
- Vikt 1,04 kg

U101

- Värmemadrass, halvkropp
- B: 74,9 cm x L: 98,4 cm
- Vikt 0,9 kg



U102

- Värmemadrass, helkropp
- B: 74,9 cm x L: 127 cm
- Vikt 1,5 kg




Hotdog

Small Pediatric Head Warming Wrap

for patients < 8 kg


Notes:

Use cable!

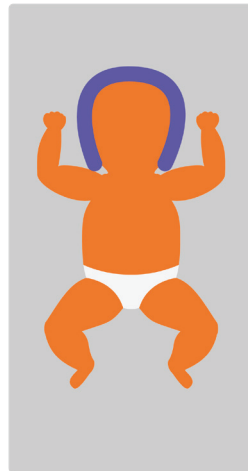

- Huvudvärmare, small
- För patienter < 8 kg
- B: 74,9 cm x L: 98,4 cm
- 0,09 kg

- Huvudvärmare, large
- För patienter > 8 kg
- B: 74,9 cm x L: 98,4 cm
- 0,18 kg

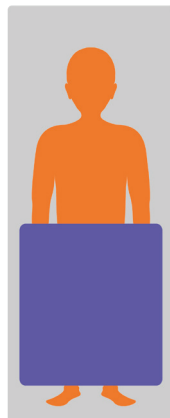

- Värmetäcke, halvkropp
- B: 45,72 cm x L: 55,88 cm L
- 0,45 kg



- Värmemadrass
- För patienter < 20 kg
- B: 44,45 cm x L: 73,66 cm
- 1 kg

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
WC77	Kontrollenhet, multiport	1
B500	Värmetäcke, universal 43,2 cm B x 76,2 cm L	1
B103	Värmetäcke, halvkropp 74,9 cm B x 98,4 cm L	1
B104	Värmetäcke, helkropp 74,3 cm B x 128,6 cm L	1
B107	Huvudvärmare, vuxen 19,7 cm B x 70,5 cm	1
U101	Värmemadrass, halvkropp 74,9 cm W x 98,4 cm L	1
U102	Värmemadrass, helkropp 74,9 cm W x 98,4 cm L	1
U300	Värmemadrass, trendelenburg 74,9 cm B x 98,4 cm L	1
<i>Neonatal och pediatrik vård</i>		
B270	Huvudvärmare, small 74,9 cm B x 98,4 cm L	1
B271	Huvudvärmare, large 74,9 cm B x 98,4 cm L	1
B203	Värmetäcke, halvkropp 74,9 cm B x 98,4 cm L	1
U220	Värmemadrass 74,9 cm B x 98,4 cm L	1
<i>Tillbehör</i>		
A101	Kabel för anslutning av värmefi lt (gul)	1
A112	Kabel för anslutning av madrass (blå)	1
A116	Rullställning för kontrollenhet, inkl. 2 stycken trådställ	1
A108	Trådställ för montering på droppställ	1
A109	Trådställ för montering på vägg	1
A110	Trådställ för montering på kontrollenhet	1

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se

1/2024