

Ultrasoft

Trakeostomikanyler



Steripolar

Taking care further

Ultrasoft trakeostomikanyler kännetecknas av mycket hög patientkomfort på grund av särskilt mjukt och flexibelt material i både ytter- och innerkanylen. Kanylerna har en låg vikt och formar sig väldigt lätt utifrån den enskilda patientens anatomi. Kanylerna består av nedbrytbart, latexfritt och DEHP-fritt material.

Ultrasofts ytterkanyler har en 15 mm-koppling och en särdeles tunnväggig lågtryckskuff i polyuretan (PU) för att undvika bland annat microaspiration.

Ultrasoft trakeostomikanyler utan lågtryckskuff

- För patienter som inte längre behöver kanyl med kuff
- För permanent användning efter trakeostomi eller laryngektomi
- Vid röntgen
- Kan användas upp till 6 månader
- Ultrasoft Voice – fenestrerad trakeostomikanyl till patienter med bibehållen stämbandsfunktion, fenestring ökar luftflödet förbi stämbanden och underlättar tal
- Ultrasoft Voice inkluderar även dekanyleringshatt och talventil

Alla set inkluderar nackband och obturator

Ultrasoft trakeostomikanyler med lågtryckskuff

- För ventilerade patienter
- Till patienter med hypersalivation
- För patienter med risk för aspiration
- Kan användas upp till 29 dagar
- Ytterkanyl med särdeles tunnväggig lågtryckskuff i polyuretan (PU)
- Ultrasoft Voice och Ultrasoft Suction Voice inkluderar även dekanyleringshatt och talventil
- Ultrasoft Suction och Ultrasoft Suction Voice inkluderar även sugkopplingsstycke
- Ultrasoft Suction och Ultrasoft Suction Voice är lämpliga till patienter med sväljsvårigheter



Ultrasoft Basic	Ultrasoft Voice
Utan talfunktion	Med talfunktion
Transparent innerkanyl	Röd, fenestrerad innerkanyl
Vit, röntgentät innerkanyl	
Inkl. nackband och obturator	



Ultrasoft Basic Cuff	Ultrasoft Voice Cuff
Utan talfunktion	Med talfunktion
Transparent innerkanyl	Röd, fenestrerad innerkanyl
Vit, röntgentät innerkanyl	
Inkl. nackband och obturator	



Ultrasoft Suction	Ultrasoft Suction Voice
Utan talfunktion	Med talfunktion
Transparent innerkanyl	Röd, fenestrerad innerkanyl
Vit, röntgentät innerkanyl	
Inkl. nackband, obturator och sugkopplingsstycke	



Nackband



Obturator



Talventil



Dekanyleringshatt



Sugkopplingsstycke

Produktsortiment

Ultrasoft				
Utan kuff:				
Utan talfunktion	Ultrasoft Basic			
Med talfunktion	Ultrasoft Voice	X		
Med kuff:				
Utan talfunktion	Ultrasoft Basic Cuff		X	
Med talfunktion	Ultrasoft Voice Cuff	X	X	
Med kuff och subglottisk sugfunktion:				
Utan talfunktion	Ultrasoft Suction		X	X
Med talfunktion	Ultrasoft Suction Voice	X	X	X



Med talfunktion



Med lågtryckskuff




Med subglottisk sugfunktion

Storlekar och längder

Storlekarna på trakeostomikanylerna baserar sig på den europeiska standarden DIN EN ISO 5366-1 (ekvivalent till ISO 5366-1).

Storlek	ID _{OC}	OD	ID _{IC}	Ln	Lb
6	6,0	9,2	4,4	64,5	73
7	7,0	10,5	5,4	70,0	79
8	8,0	11,6	6,4	75,5	87
9	9,0	12,6	7,4	81,0	93
10	10,0	13,6	8,4	87,5	100

Alla uppgifter i mm

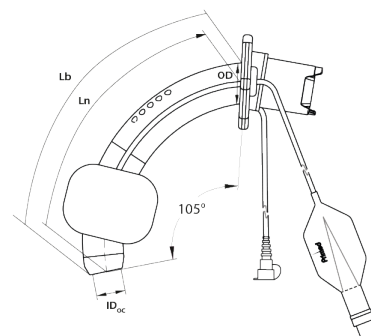

Lb = längd uppmätt på ytterkurvan
 Ln = längd uppmätt på medellinjen
 ID_{OC} = ytterkanylens innerdiameter i mm i kanylspetsen
 ID_{IC} = innerkanylens innerdiameter i mm i kanylspetsen

Ultrasoft innerkanyler finns som...



Transparent
För förbättrad
sekretionsbedömning



Röd, fenestrerad
Möjliggör tal tillsammans
med en talventil



Vit, röntgentät
För att kontrollera
positionen

Transparent	Röd, fenestrerad	Vit, röntgentät	Storlek	Antal / förpackning
102018	102028	102038	6	5
102019	102029	102039	7	5
102020	102030	102040	8	5
102021	102031	102041	9	5
102022	102032	102042	10	5

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
103013	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic utan kuff, storlek 6	1
103014	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic utan kuff, storlek 7	1
103015	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic utan kuff, storlek 8	1
103016	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic utan kuff, storlek 9	1
103017	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic utan kuff, storlek 10	1
103023	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic med kuff, storlek 6	1
103024	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic med kuff, storlek 7	1
103025	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic med kuff, storlek 8	1
103026	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic med kuff, storlek 9	1
103027	Trakeostomikanyl Ultrasoft Basic med kuff, storlek 10	1
103033	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice utan kuff, storlek 6	1
103034	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice utan kuff, storlek 7	1
103035	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice utan kuff, storlek 8	1
103036	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice utan kuff, storlek 9	1
103037	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice utan kuff, storlek 10	1
103043	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice Cuff med kuff, storlek 6	1
103044	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice Cuff med kuff, storlek 7	1
103045	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice Cuff med kuff, storlek 8	1
103046	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice Cuff med kuff, storlek 9	1
103047	Trakeostomikanyl Ultrasoft Voice Cuff med kuff, storlek 10	1
103053	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 6	1
103054	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 7	1
103055	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 8	1
103056	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 9	1
103057	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 10	1
103063	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 6	1
103064	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 7	1
103065	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 8	1
103066	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 9	1
103067	Trakeostomikanyl Ultrasoft Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 10	1

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

08-430 09 80

info@steripolar.se

www.steripolar.se

09/2023