

Anestesi- och respiratorslang med delad innerlumen

QTube™ och QTube™ IGS



Steripolar

Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande *Taking care further* i vårt dagliga arbete.

QTube™ och QTube™ IGS anesthesi- och respiratorslang med delad innerlumen

QTube™ anesthesi- och respiratorslang med eller utan IGS (integrerad gassamlingslang)

- Godkänd från >3 kg
- Alla slangar är tryck- och läcktestade
- Låg vikt och stabil i sin unika konstruktion med 22 mm delad innerlumen
- Med swivelkoppling som förhindrar vrid och drag vid patientanslutningen
- Värmeeffektiv med delad innerlumen som värmer upp den inspiratoriska gasen
- QTube™ Water Trap Series finns med 1 eller 2 vattenfällor för uppsamling av kondensat



Compliance

Produktnummer	Längd	6 L/min	12 L/min	20 L/min	30 L/min	40 L/min	50 L/min	60 L/min
Q112218P/IGS	180 cm	0,974	0,996	0,998	1,020	1,023	1,026	1,030
Q112230P/IGS	300 cm	1,489	1,493	1,518	1,521	1,525	1,538	1,522

Inspiratorisk och expiratorisk resistans

Produktnummer	5 L/min		10 L/min		15 L/min		20 L/min		30 L/min		40 L/min		50 L/min		60 L/min	
	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E
Q112218P/IGS	0,06	0,07	0,14	0,17	0,27	0,31	0,45	0,50	0,84	0,98	1,29	1,83	1,83	2,04	2,35	2,78
Q112230P/IGS	0,09	0,10	0,20	0,24	0,37	0,45	0,69	0,89	1,28	1,48	1,92	2,64	2,64	3,03	6,65	4,10

QTube™ materialinnehåll

- Adapter och kopplingar: PP, PC
- Andningslang och andningskrets: PE+EVA / PP+EVA
- Samplingslang: medicinsk ftalatfri PVC eller PU

Övrig beställningsinformation

Den andra siffran i produktnumret anger om koppling mot patient är med swivelknä

1 = utan swivelknä

2 = med swivelknä

Exempel: Q112218P är utan swivelknä, Q122218P är med swivelknä

QTube™ Basic


- Barn/vuxen slang
- Swivelknä 15mmF med CO2 samplingsport
- 22mmF/22mmF T-konnektor och 40 cm slang



Produktnummer	Produktbeskrivning	Samplingsport	Längd	Antal / förpackning
Q122218P	QTube Basic	Med	180 cm	30
Q122224P	QTube™ Basic	Med	240 cm	30
Q122227P	QTube™ Basic	Med	270 cm	30
Q122230P	QTube™ Basic	Med	300 cm	30

QTube™ IGS


- Barn/vuxen slang
- Swivelknä 15mmF utan CO2 samplingsport
- IGS (Integrerad samplings slang)
- 22mmF/22mmF T-konnektor och 40 cm slang
- Extern samplings slang 50 cm

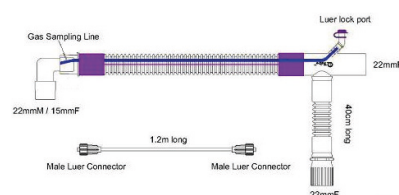

Produktnummer	Produktbeskrivning	Samplingsport	Längd	Antal / förpackning
Q122218N-IGS50GSL	QTube™ IGS	Utan	180 cm	30
Q122224N-IGS50GSL	QTube™ IGS	Utan	240 cm	30
Q122227N-IGS50GSL	QTube™ IGS	Utan	270 cm	30
Q122230N-IGS50GSL	QTube™ IGS	Utan	300 cm	30
Q122260N-IGS50GSL	QTube™ IGS	Utan	600 cm	30

QTube™ Water Trap Series


- Barn/vuxen slang
- Swivelknä 15mmF med/utan CO2 samplingsport
- Med en eller två vattenfällor
- Extern samplings slang 50 cm
- T-konnektor och 40 cm slang

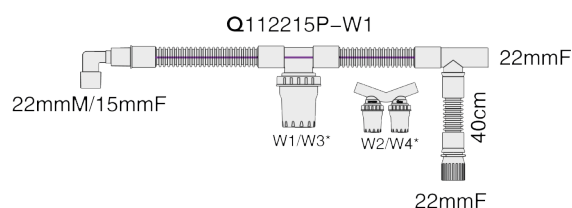

Produktnummer	Produktbeskrivning	Samplingsport	Längd	Antal / förpackning
Q122218P-W1	QTube™ WTS med 1 vattenfälla	Med	180 cm	30
Q122224P-W1	QTube™ WTS med 1 vattenfälla	Med	240 cm	30
Q122230P-W1	QTube™ WTS med 1 vattenfälla	Med	300 cm	30
Q122218P-W2	QTube™ WTS med 2 vattenfällor	Med	180 cm	30
Q122224P-W2	QTube™ WTS med 2 vattenfällor	Med	240 cm	30
Q122230P-W2	QTube™ WTS med 2 vattenfällor	Med	300 cm	30
Q122218N-IGSW450GSL	QTube™ WTS med 2 vattenfällor och IGS	Utan	180 cm	30
Q122224N-IGSW450GSL	QTube™ WTS med 2 vattenfällor och IGS	Utan	240 cm	30
Q122227N-IGSW450GSL	QTube™ WTS med 2 vattenfällor och IGS	Utan	270 cm	30
Q122230N-IGSW450GSL	QTube™ WTS med 2 vattenfällor och IGS	Utan	300 cm	30

QTube™ IGS med andningsballong


- Barn/vuxen slang
- Swivelknä 15mmF utan CO2 samplingsport
- IGS (Integrerad samplings slang)
- 22mmF/22mmF T-konnektor och 40 cm slang
- Extern samplings slang 50 cm
- Ventilatorslang med 2 liter andningsballong med ring

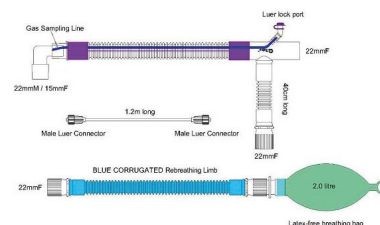

Produktnummer	Produktbeskrivning	Samplingsport	Längd	Antal / förpackning
QI22218N-IGS18BC2L	QTube™ IGS med andningsballong	Utan	180 cm	30
QI22227N-IGS27BC2L	QTube™ IGS med andningsballong	Utan	270 cm	20

QTube™ med andningsballong och adapter


- Barn/vuxen slang
- Swivelknä 15mmF med/utan CO2 samplingsport
- IGS (Integrerad samplings slang)
- 22mmF/22mmF T-konnektor och 40 cm slang
- Extern samplings slang 50 cm
- Ventilatorslang med 2 liter andningsballong samt adapter passande till GE Healthcare Aisys™, Avance™ och Aespire Carestation Machines

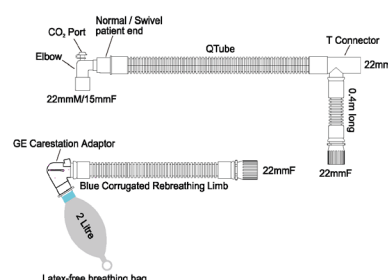

Produktnummer	Produktbeskrivning	Samplingsport	Längd	Antal / förpackning
QI22218P-GEI2BC2L	QTube™ med andningsballong	Med	180 cm	30
QI22227P-GEI2BC2L	QTube™ med andningsballong	Med	270 cm	20
QI22218N-IGSGEI2BC2L	QTube™ IGS med andningsballong	Utan	180 cm	30
QI22227N-IGSGEI2BC2L	QTube™ IGS med andningsballong	Utan	270 cm	20

Gassamplingslang

- Hane/Hona och Hane/Hane
- ID: 1,25 mm

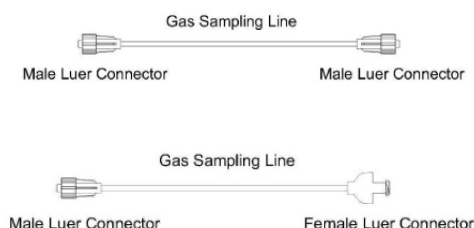

Produktnummer	Produktbeskrivning	Koppling	Längd	Antal / förpackning
QPS8000.5	Gassamplings slang	Hane/Hane	0,5 m	200
QPS8001.2	Gassamplings slang	Hane/Hane	1,2 m	200
QPS8002	Gassamplings slang	Hane/Hane	2 m	200
QPS8003	Gassamplings slang	Hane/Hane	3 m	200
QPS8004	Gassamplings slang	Hane/Hane	4 m	200
QPS8006	Gassamplings slang	Hane/Hane	6 m	100
QPS8102	Gassamplings slang	Hane/Hona	2 m	200
QPS8103	Gassamplings slang	Hane/Hona	3 m	200

QTube™ och QTube™ IGS anestesi- och respiratorslang




Corrugated Exterior Design
Prevents circuit collapse and occlusion during clinical use




Integrated Gas Sampling Design
Enhances CO₂ sampling accuracy

Mechanical Joint Design
Meticulously constructed joint connectors to withstand pull force over 120 newtons

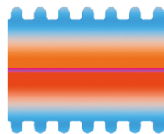

Single Tube Bi-lumen Design
Thermally efficient transferring heat from expiratory to inspiratory lumen, preventing heat loss

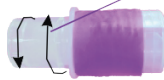


Swivel Patient-End
Reduces torque on airway, maximizing comfort and safety of users



QPlug Leak Tester
An optimal solution for independent septum and circuit leakage testing



Smooth Septum Design
Boosts internal flow while minimizing breathing resistance and circuit compliance

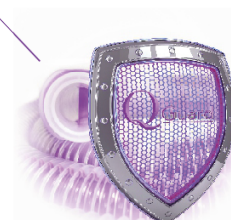

QGuard Antimicrobial Technology
Clinically tested for use up to 168 hours against bacterial build up of 50 different common species

Extendable Side Limb
Applicable on all anesthesia machines with 40cm limb

Steripolar

Taking care further

Medicinteknisk produkt. Tillverkare Shenzhen Envisen Intustry Co., Ltd. 0197



Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se

2/2024