

Säker intubation för alla patienter

Endotrakealtuber med Flex-Tip®



Steripolar

Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

Endotrakealtuber med Flex-Tip®

1996 identifierade Dr. Jeff Parker (Parker Medical) brister med standarddesignen på endotrakealtuber (ETT) som ofta resulterade i långsammare, svårare och ofta traumatiska intubationer när de utförs av narkosläkare på alla kompetensnivåer. Hans forskning resulterade i en helt ny produkt – **Parker Flex-Tip®**.

Denna revolutionerande design med centrerad spets ger en betydande förbättring med lättare intubationer och en förbättring av patientsäkerheten. Oberoende kliniska studier visar betydande kliniska fördelar jämfört med standard ETT.^{1,2}


Flex-Tip®
Endotrakealtubspets



Standard
Endotrakealtubspets



1. Radesic BP, Winkleman C, Einsporn R, Kless J. Ease of intubation with the Parker Flex-Tip or a standard Mallinckrodt endotracheal tube using a video laryngoscope (GlideScope). AANA J. 2012;80:363-372.
2. Sanuki T, Hirokane M, Matsuda Y, Sugioka S, Kotani J. The Parker Flex-Tip tube for nasotracheal intubation: the influence on nasal mucosal trauma. Anaesthesia. 2010; 65:8-11.

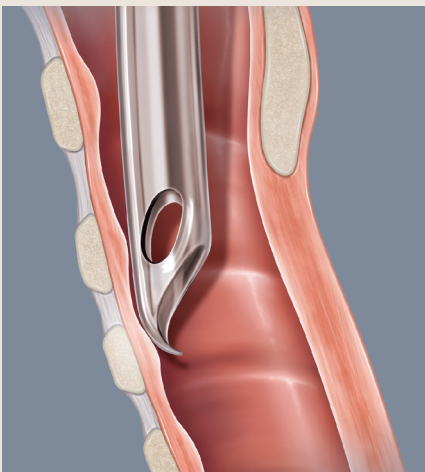

En unik, patenterad design för att undvika sammanstötningar med anatomin i luftvägen, vilket ger en smidigare och enklare intubation


- Atraumatisk Flex-Tip® minskar förekomsten av sammanstötningar med anatomin i luftvägen.
- Mjuk, flexibel och avrundad spets som glider genom luftvägen och lättare passerar stämband.
- Centrerad spets förhindrar trauma mot luftvägen.
- Spetsen kommer nära intubationsledare och optik.

Flex-Tip® – Produktsortiment

Ett brett sortiment av storlekar och utformningar för att tillgodose alla behov hos både vuxna och pediatrika patienter.

Endotrakealtub med kuff


- Högvolum/lågtryckskuff

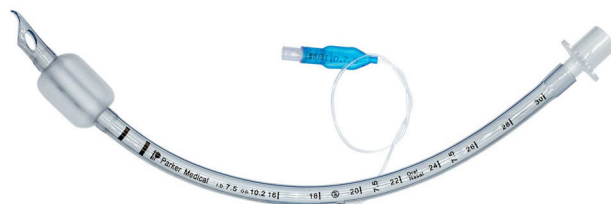

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFHV40	Endotrakealtub med kuff	4,0 mm	10
IPFHV45	Endotrakealtub med kuff	4,5 mm	10
IPFHV50	Endotrakealtub med kuff	5,0 mm	10
IPFHV55	Endotrakealtub med kuff	5,5 mm	10
IPFHV60	Endotrakealtub med kuff	6,0 mm	10
IPFHV65	Endotrakealtub med kuff	6,5 mm	10
IPFHV70	Endotrakealtub med kuff	7,0 mm	10
IPFHV75	Endotrakealtub med kuff	7,5 mm	10
IPFHV80	Endotrakealtub med kuff	8,0 mm	10
IPFHV85	Endotrakealtub med kuff	8,5 mm	10
IPFHV90	Endotrakealtub med kuff	9,0 mm	10
IPFHV95	Endotrakealtub med kuff	9,5 mm	10

Endotrakealtub med kuff

- Lågprofilskuff

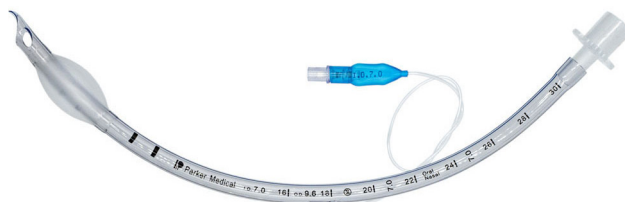

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFLP30	Endotrakealtub med lågprofilskuff	3,0 mm	10
IPFLP35	Endotrakealtub med lågprofilskuff	3,5 mm	10
IPFLP40	Endotrakealtub med lågprofilskuff	4,0 mm	10
IPFLP45	Endotrakealtub med lågprofilskuff	4,5 mm	10
IPFLP50	Endotrakealtub med lågprofilskuff	5,0 mm	10
IPFLP55	Endotrakealtub med lågprofilskuff	5,5 mm	10
IPFLP60	Endotrakealtub med lågprofilskuff	6,0 mm	10
IPFLP65	Endotrakealtub med lågprofilskuff	6,5 mm	10
IPFLP70	Endotrakealtub med lågprofilskuff	7,0 mm	10
IPFLP75	Endotrakealtub med lågprofilskuff	7,5 mm	10
IPFLP80	Endotrakealtub med lågprofilskuff	8,0 mm	10
IPFLP85	Endotrakealtub med lågprofilskuff	8,5 mm	10
IPFLP90	Endotrakealtub med lågprofilskuff	9,0 mm	10

Flex-Tip® – Produktsortiment

Endotrakealtub utan kuff


- Utan kuff



Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFUO25	Endotrakealtub utan kuff	3,0 mm	10
IPFUO30	Endotrakealtub utan kuff	3,5 mm	10
IPFUO35	Endotrakealtub utan kuff	4,0 mm	10
IPFUO40	Endotrakealtub utan kuff	4,0 mm	10
IPFUO45	Endotrakealtub utan kuff	4,5 mm	10
IPFUO50	Endotrakealtub utan kuff	5,0 mm	10
IPFUO55	Endotrakealtub utan kuff	5,5 mm	10
IPFUO60	Endotrakealtub utan kuff	6,0 mm	10
IPFUO65	Endotrakealtub utan kuff	6,5 mm	10
IPFUO70	Endotrakealtub utan kuff	7,0 mm	10

Endotrakealtub med ledare och kuff

- Med ledare
- Högvolum/lågtryckskuff

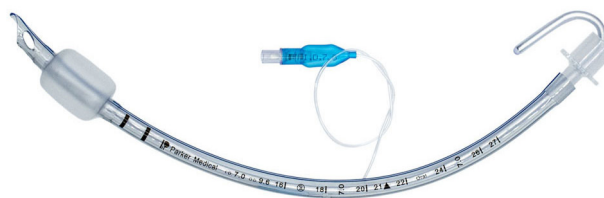


Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFST40	Endotrakealtub med ledare och kuff	4,0 mm	10
IPFST45	Endotrakealtub med ledare och kuff	4,5 mm	10
IPFST50	Endotrakealtub med ledare och kuff	5,0 mm	10
IPFST55	Endotrakealtub med ledare och kuff	5,5 mm	10
IPFST60	Endotrakealtub med ledare och kuff	6,0 mm	10
IPFST65	Endotrakealtub med ledare och kuff	6,5 mm	10
IPFST70	Endotrakealtub med ledare och kuff	7,0 mm	10
IPFST75	Endotrakealtub med ledare och kuff	7,5 mm	10
IPFST80	Endotrakealtub med ledare och kuff	8,0 mm	10
IPFST85	Endotrakealtub med ledare och kuff	8,5 mm	10
IPFST90	Endotrakealtub med ledare och kuff	9,0 mm	10

Flex-Tip® – Produktsortiment

Förformad endotrakealtub med kuff


- Förformad
- Oral
- Med kuff

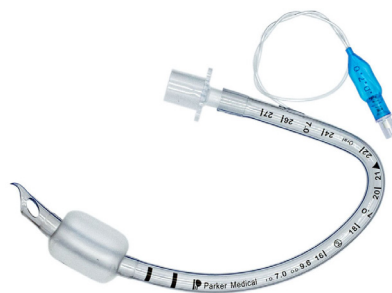

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFOC40	Endotrakealtub förformad oral med kuff	4,0 mm	10
IPFOC45	Endotrakealtub förformad oral med kuff	4,5 mm	10
IPFOC50	Endotrakealtub förformad oral med kuff	5,0 mm	10
IPFOC55	Endotrakealtub förformad oral med kuff	5,5 mm	10
IPFOC60	Endotrakealtub förformad oral med kuff	6,0 mm	10
IPFOC65	Endotrakealtub förformad oral med kuff	6,5 mm	10
IPFOC70	Endotrakealtub förformad oral med kuff	7,0 mm	10
IPFOC75	Endotrakealtub förformad oral med kuff	7,5 mm	10
IPFOC80	Endotrakealtub förformad oral med kuff	8,0 mm	10
IPFOC85	Endotrakealtub förformad oral med kuff	8,5 mm	10
IPFOC90	Endotrakealtub förformad oral med kuff	9,0 mm	10

Förformad endotrakealtub med kuff

- Förformad
- Nasal
- Med kuff

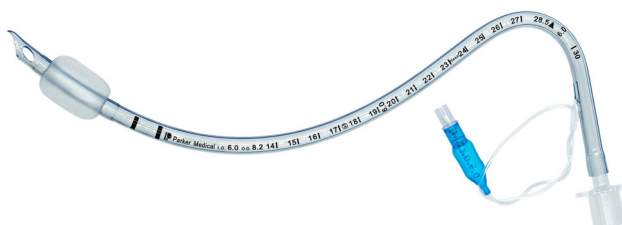

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Längd	Antal / förpackning
IPFNC40	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	4,0 mm	200 mm	5
IPFNC45	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	4,5 mm	220 mm	5
IPFNC50	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	5,0 mm	240 mm	5
IPFNC55	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	5,5 mm	270 mm	5
IPFNC60	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	6,0 mm	280 mm	5
IPFNC65	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	6,5 mm	290 mm	5
IPFNC70	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	7,0 mm	300 mm	5
IPFNC75	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	7,5 mm	310 mm	5
IPFNC80	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	8,0 mm	320 mm	5
IPFNC85	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	8,5 mm	320 mm	5
IPFNC90	Endotrakealtub förformad nasal med kuff	9,0 mm	320 mm	5

Flex-Tip® – Produktsortiment

Förformad endotrakealtub utan kuff


- Förformad
- Nasal
- Utan kuff



Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFNU30	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	3,0 mm	5
IPFNU35	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	3,5 mm	5
IPFNU40	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	4,0 mm	5
IPFNU45	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	4,5 mm	5
IPFNU50	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	5,0 mm	5
IPFNU55	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	5,5 mm	5
IPFNU60	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	6,0 mm	5
IPFNU65	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	6,5 mm	5
IPFNU70	Endotrakealtub förformad nasal utan kuff	7,0 mm	5

Förformad endotrakealtub utan kuff

- Förformad
- Oral
- Utan kuff

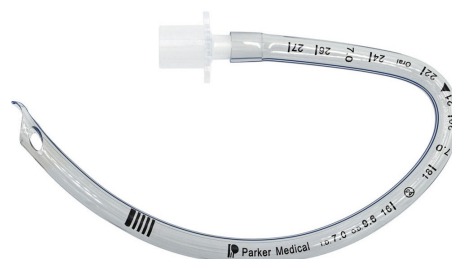

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFOU30	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	3,0 mm	10
IPFOU35	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	3,5 mm	10
IPFOU40	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	4,0 mm	10
IPFOU45	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	4,5 mm	10
IPFOU50	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	5,0 mm	10
IPFOU55	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	5,5 mm	10
IPFOU60	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	6,0 mm	10
IPFOU65	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	6,5 mm	10
IPFOU70	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	7,0 mm	10
IPFOU75	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	7,5 mm	10
IPFOU80	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	8,0 mm	10
IPFOU85	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	8,5 mm	10
IPFOU90	Endotrakealtub förformad oral utan kuff	9,0 mm	10

Flex-Tip® – Produktsortiment

Armerad endotrakealtub med kuff

- Armerad
- Med kuff



Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFRC55	Endotrakealtub armerad med kuff	5,5 mm	5
IPFRC60	Endotrakealtub armerad med kuff	6,0 mm	5
IPFRC65	Endotrakealtub armerad med kuff	6,5 mm	5
IPFRC70	Endotrakealtub armerad med kuff	7,0 mm	5
IPFRC75	Endotrakealtub armerad med kuff	7,5 mm	5
IPFRC80	Endotrakealtub armerad med kuff	8,0 mm	5
IPFRC85	Endotrakealtub armerad med kuff	8,5 mm	5
IPFRC90	Endotrakealtub armerad med kuff	9,0 mm	5
IPFRC95	Endotrakealtub armerad med kuff	9,5 mm	5

Armerad endotrakealtub utan kuff

- Armerad
- Utan kuff




Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFRU30	Endotrakealtub armerad utan kuff	3,0 mm	5
IPFRU35	Endotrakealtub armerad utan kuff	3,5 mm	5
IPFRU40	Endotrakealtub armerad utan kuff	4,0 mm	5
IPFRU45	Endotrakealtub armerad utan kuff	4,5 mm	5
IPFRU50	Endotrakealtub armerad utan kuff	5,0 mm	5

Flex-Tip® – Produktsortiment

Endotrakealtub Easy Curve med kuff

- Easy Curve Articulating Tube
- Med kuff

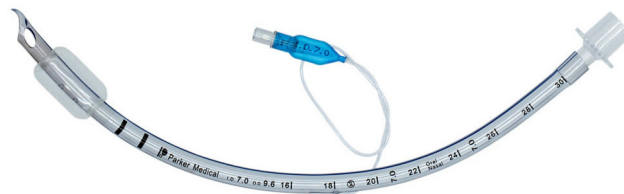

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPFEC50	Endotrakealtub Easy Curve med kuff	5,0 mm	10
IPFEC60	Endotrakealtub Easy Curve med kuff	6,0 mm	10
IPFEC70	Endotrakealtub Easy Curve med kuff	7,0 mm	10
IPFEC80	Endotrakealtub Easy Curve med kuff	8,0 mm	10

Endotrakealtub Magill med microkuff

- Magill
- Med kortare microkuff i PU nära tubspetsen
- Utan Murphy-hål




Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPTCL30	Endotrakealtub Magill med microkuff	3,0 mm	10
IPTCL35	Endotrakealtub Magill med microkuff	3,5 mm	10
IPTCL40	Endotrakealtub Magill med microkuff	4,0 mm	10
IPTCL45	Endotrakealtub Magill med microkuff	4,5 mm	10
IPTCL50	Endotrakealtub Magill med microkuff	5,0 mm	10
IPTCL55	Endotrakealtub Magill med microkuff	5,5 mm	10
IPTCL60	Endotrakealtub Magill med microkuff	6,0 mm	10
IPTCL65	Endotrakealtub Magill med microkuff	6,5 mm	10
IPTCL70	Endotrakealtub Magill med microkuff	7,0 mm	10

Flex-Tip® – Produktsortiment

Endotrakealtub med ThinCuff

- Med längre ThinCuff i PU
- Två Murphy-hål

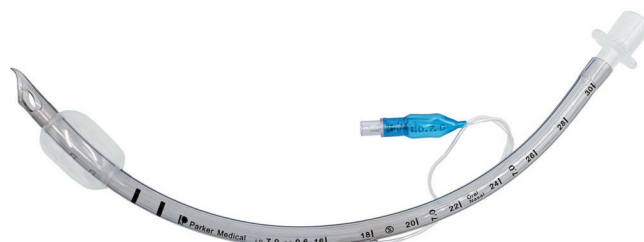

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPTCY60	Endotrakealtub ThinCuff	6,0 mm	10
IPTCY65	Endotrakealtub ThinCuff	6,5 mm	10
IPTCY70	Endotrakealtub ThinCuff	7,0 mm	10
IPTCY75	Endotrakealtub ThinCuff	7,5 mm	10
IPTCY80	Endotrakealtub ThinCuff	8,0 mm	10
IPTCY85	Endotrakealtub ThinCuff	8,5 mm	10
IPTCY90	Endotrakealtub ThinCuff	9,0 mm	10
IPTCY95	Endotrakealtub ThinCuff	9,5 mm	10

Endotrakealtub Microlaryngeal med kuff

- MLT-tub




Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / förpackning
IPMLT40	Endotrakealtub Microlaryngeal med kuff	4,0 mm	10
IPMLT50	Endotrakealtub Microlaryngeal med kuff	5,0 mm	10
IPMLT60	Endotrakealtub Microlaryngeal med kuff	6,0 mm	10

Flex-Tip® – Produktsortiment

Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff


- Subglottisk sugport som fästs vid kontinuerliga eller intermittenta sugkällor
- Minskar förekomster av VAP hos ventilerade patienter
- Minimalt utrymme mellan fiberoptik och ledare
- PVC-kuff

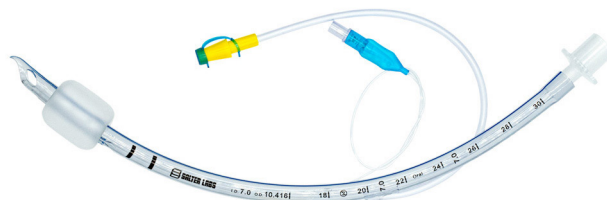

Produktnummer	Produktbeskrivning	Kuff Ø	ID	OD	Antal / förpackning
ISFTVVC60	Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff	25 mm	6,0 mm	9,0 mm	10
ISFTVVC65	Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff	25 mm	6,5 mm	9,8 mm	10
ISFTVVC70	Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff	26 mm	7,0 mm	10,4 mm	10
ISFTVVC75	Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff	26 mm	7,5 mm	11,2 mm	10
ISFTVVC80	Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff	28 mm	8,0 mm	11,8 mm	10
ISFTVVC85	Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff	28 mm	8,5 mm	12,6 mm	10
ISFTVVC90	Endotrakealtub Trach-Vac med PVC-kuff	28 mm	9,0 mm	13,1 mm	10

Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff

- Subglottisk sugport som fästs vid kontinuerliga eller intermittenta sugkällor
- Minskar förekomster av VAP hos ventilerade patienter
- Minimalt utrymme mellan fiberoptik och ledare
- Ultratunn PU-kuff för att minska förekomsten av VAP

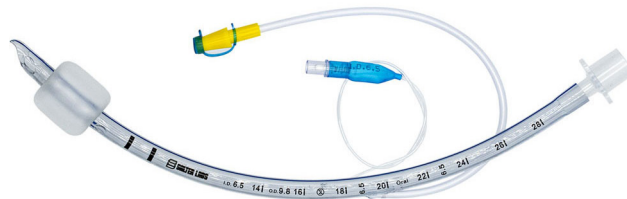


Produktnummer	Produktbeskrivning	Kuff Ø	ID	OD	Antal / förpackning
ISFTVPU60	Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff	20 mm	6,0 mm	9,0 mm	10
ISFTVPU65	Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff	24 mm	6,5 mm	9,8 mm	10
ISFTVPU70	Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff	24 mm	7,0 mm	10,4 mm	10
ISFTVPU75	Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff	26 mm	7,5 mm	11,2 mm	10
ISFTVPU80	Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff	26 mm	8,0 mm	11,8 mm	10
ISFTVPU85	Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff	30 mm	8,5 mm	12,6 mm	10
ISFTVPU90	Endotrakealtub Trach-Vac med PU-kuff	30 mm	9,0 mm	13,1 mm	10

Flex-Tip® – Produktsortiment

Nästub

- Ett effektivt och säkert sätt att hålla en patients luftvägar öppna
- Justerbar ring för anpassning till önskat djup
- Det patenterade spetsdesignen leder till atraumatisk införande
- Av mjukt och flexibelt PVC
- Extra 15 mm adapter medföljer

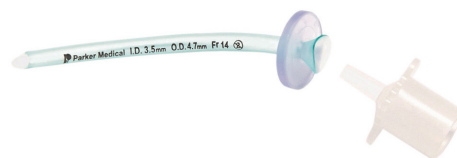

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	OD	ID	Antal / förpackning
INPA12	Nästub	12 Fr	4,0 mm	3,0 mm	10
INPA14	Nästub	14 Fr	4,7 mm	3,5 mm	10
INPA16	Nästub	16 Fr	5,3 mm	4,0 mm	10
INPA18	Nästub	18 Fr	6,0 mm	4,5 mm	10
INPA20	Nästub	20 Fr	6,7 mm	5,0 mm	10
INPA22	Nästub	22 Fr	7,3 mm	5,5 mm	10
INPA24	Nästub	24 Fr	8,0 mm	6,0 mm	10
INPA26	Nästub	26 Fr	8,7 mm	6,5 mm	10
INPA28	Nästub	28 Fr	9,3 mm	7,0 mm	10
INPA30	Nästub	30 Fr	10,0 mm	7,5 mm	10
INPA32	Nästub	32 Fr	10,7 mm	8,0 mm	10
INPA34	Nästub	34 Fr	11,3 mm	8,5 mm	10
INPA36	Nästub	36 Fr	12,0 mm	9,0 mm	10

Intubationsledare

- I aluminium med PVC-hölje
- Med trubbig spets för minskad risk för trauma




Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	OD	Antal / förpackning
ISTLT6	Intubationsledare	6 Fr	2,0 mm	20
ISTLT10	Intubationsledare	10 Fr	3,3 mm	20
ISTLT14	Intubationsledare	14 Fr	4,7 mm	20

Kliniskt bevisade erfarenheter från intubation


Kliniska studier påvisar lättare intubation vid flera olika omständigheter.^{1,2}

Intubationens lätthet

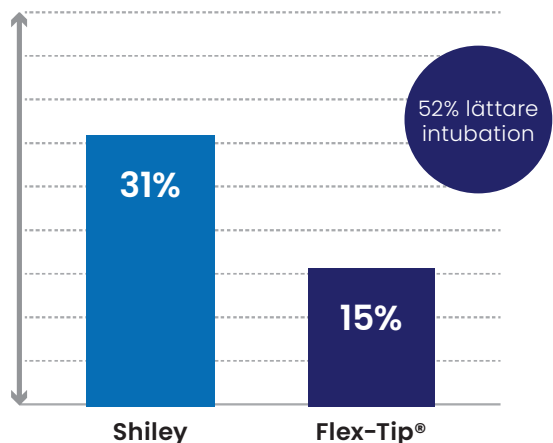


Avser patienter intuberade med GlideScope (ej svår luftväg)

Intubationens lätthet

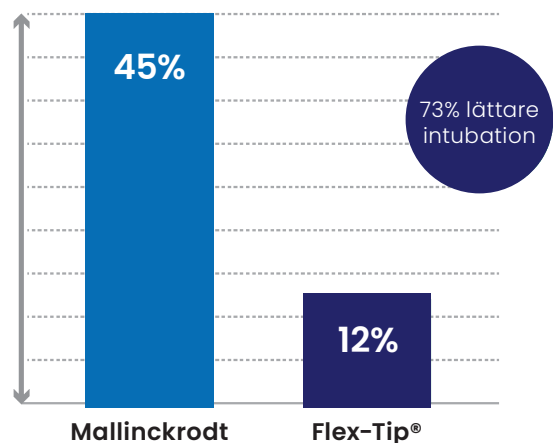


Avser patienter intuberade med GlideScope där luftvägarna var svåra att visualisera (ej svår luftväg)

Intubationens lätthet

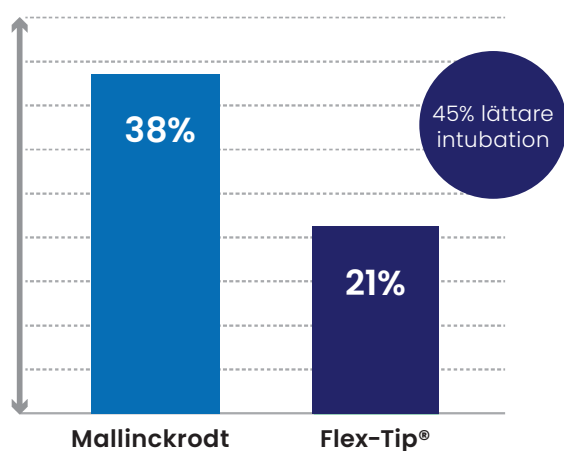

Avser patienter intuberade med GlideScope utan muskelrelax (ej svår luftvägar)

Patienter med allvarlig blödning

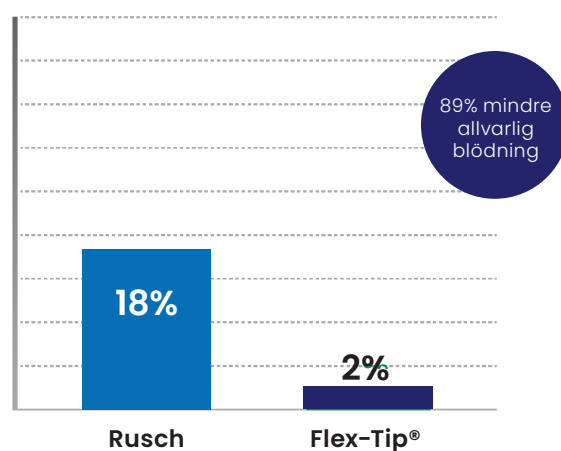

Avser nasotrachealintubation (ej svår luftväg)

1. Radesic BP, Winkleman C, Einsporn R, Kless J. Ease of intubation with the Parker Flex-Tip or a standard Mallinckrodt endotracheal tube using a video laryngoscope (GlideScope). AANA J. 2012;80:363-372.
2. Sanuki T, Hirokane M, Matsuda Y, Sugioka S, Kotani J. The Parker Flex-Tip tube for nasotracheal intubation: the influence on nasal mucosal trauma. Anaesthesia. 2010; 65:8-11.

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se