

Manukahonung för naturlig sårbehandling

MANUKAMED™



Steripolar
Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

MANUKAMED™ – Naturlig antibakteriell sårvård med manukahonung

Det antibakteriella ManukaMed-sortimentet, baserat på 100 % manukahonung, skapar optimala fuktiga förhållanden som stödjer sårhäkning. Förutom den naturliga antimikrobiella aktiviteten har manukahonung ett högt sockernehåll, vilket bidrar till ett högt osmotiskt tryck.

Detta osmotiska tryck drar vätska från sårvävnaden till sårytan, vilket hjälper till att återfukta såret samt mjuka upp och underlätta avlägsnande av beläggningar och nekrotisk (död) vävnad.

Produkterna har ett pH-värde på 3,0–4,5. Studier har visat att kroniska sår korrelerar med alkaliska pH-nivåer mellan 7,15–8,84. Att bibehålla en surare sårmiljö kan främja sårhäkningen.

ManukaMeds sterila produkter är utformade för att skapa och bibehålla en fuktig sårmiljö, och lämpar sig för behandling av olika sårtyper.

Indikationer

- Diabetesfotsår
- Kirurgiska sår
- Traumasår
- Bensår (venösa)
- Trycksår
- Brännskador (första och andra gradens)




Produkterna har ett MGO-värde (metylglyoxal) på över 600 mg/kg, vilket indikerar stark antibakteriell effekt.

Vad är manukahonung?

Honung har använts för sårvård i tusentals år, men forskning har specifikt visat att blomman från den nyzeeländska manukaväxten (*Leptospermum*-arter) producerar en unik, medicinsk honung med optimala antibakteriella egenskaper för sårhäkning.

MANUKAMED-sårvårdssortiment

ManukaMeds sårvårdsprodukter innehåller 100 % manukahonung. Honungen steriliseras med gammastrålning, vilket avlägsnar eventuella allergiframkallande orenheter. Honungen skördas från spårbara gårdar.

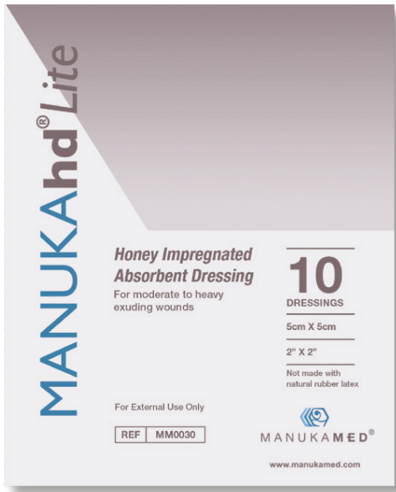

MANUKAhd® Lite-Honung- impregnerad gele- rande fiberförband

Ett sårförband impregnerad med medicinsk manukahonung och innehållande superabsorberande, korsbundna nätfibrer. Förbandet sväller och bildar en gel vid kontakt med sårvätska.

Manukahonungen frigörs gradvis i sårbädden samtidigt som vätska och nekrotisk vävnad absorberas in i förbandet. De korsbundna fibrerna binder död vävnad i förbandet, vilket leder till effektiv rengöring av sårbädden. Förbandet är flexibelt och bekvämt att använda.

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Förpackningstorlek	Sailab BE05006 Sailab-kod
MM0030C	MANUKAhd Lite	5 x 5 cm	10 kpl / ltk	314526
MM0031C	MANUKAhd Lite	10 x 12,5 cm	10 kpl / ltk	314716

MANUKAhd® Lite. CE-märkt medicinteknisk produkt, CE2729. Tillverkar: ManukaMed. Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk.



MANUKAhd®-Honung- impregnerad gelerande fiberförband

MANUKAhd® är det mest honungsrika och absorberande förbandet i hela MANUKAhd-serien. Det är utformat för att ligga kvar på såret i 5-7 dagar.

Det innehåller superabsorberande och högabsorptiva korsbundna fibrer. Förbandet sväller och bildar en gel vid kontakt med sårvätska. De korsbundna fibrerna binder nekrotisk vävnad, vilket stöder effektiv autolytisk debridering och rengöring av sårbädden. Flexibelt och bekvämt – utformat för både effekt och patientkomfort.

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Förpackningstorlek	Sailab BE05006 Sailab-kod
MM0013C	MANUKAhd	5 x 5 cm	10 kpl / ltk	314526
MM0017C	MANUKAhd	10 x 12,5 cm	10 kpl / ltk	314716

MANUKAhd®. CE-märkt medicinteknisk produkt, CE2729. Tillverkar: ManukaMed. Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk.



MANUKApli – Antibakteriell medicinsk tubhonung

MANUKApli sårgel är 100 % manukahonung i en praktisk tubapplikator. Gelen är lätt att applicera i djupa och hålformade sår. Det finns inget behov av att avlägsna honungen från såret – den absorberas säkert av vävnaden.

Applicera alltid ett lager honung på 1–2 mm i sårbedden. Beroende på mängden sårvätska rekommenderas att täcka med ett MANUKAtex- eller MANUKAhd-förband. Tuben har en återförslutningsbar kork för hygienisk och praktisk användning.

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Förpackningstorlek	Sailab BE02006 Sailab-koodi
MM0049C	MANUKApli 30 g tube (2 x 15 g)	2 x 15 g	5 kpl / ltk	314663
MM0051C	MANUKApli 44 g tube	44 g	5 kpl / ltk	314663

MANUKApli. CE-märkt medicinteknisk produkt, CE2729. Tillverkar: ManukaMed. Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk.



MANUKAtex – Antibakteriellt honungsnätförband

MANUKAtex är ett flexibelt nätförband i acetat, indränkt med 100 % manukahonung. Det är lätt att använda både vid ytliga och djupa sår, och nätet kan enkelt avlägsnas även från djupa sår.

Kan appliceras vikt eller rullad beroende på sårtyp. För engångsbruk.

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Förpackningstorlek	Sailab BE10006 Sailab-koodi
MM0010C	MANUKAtex	10 x 12,5 cm	10 / ltk	314727
MM0012C	MANUKAtex	10 x 122 cm	4 kpl / ltk	-

MANUKAtex. CE-märkt medicinteknisk produkt, CE2729. Tillverkar: ManukaMed. Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk.

Steripolar
Taking care further

Kontakta oss

Steripolar AB
018-430 09 80
info@steripolar.se

steripolar.se