



CADD-Solis VIP™

Ambulatoriskt infusionssystem för hemmabruk

Smart infusionssystem för multibehandling, lätt att använda i vardagen

icumedical
human connections

Utformad för att vara lättanvänd och säker för hemmabruk

CADD-Solis VIP ambulatoriska infusionspump är idealisk för hemmabruk, med en liten, bärbar design samt ett lättanvänt gränssnitt. Den intuitiva hjälpskärmen gör att du kan felsöka hemma och minska antal hembesök av vårdpersonal. Färgkodade skärmar ger en ögonblicklig överblick av behandlingens status. CADD-behållare stödjer läkemedelssäkerheten och friflödesskydd av vätskeleverans. CADD-Solis VIP ambulatoriska pump har fem mångsidiga leveranslägen så att du kan ge infusionsvård bekvämt i hemmet.



Intuitiva skärmar för leveransstatus visar hur infusionen fortskrider



- PCA**
Smärtlindring använder följande leveransmetoder individuellt eller i kombination med varandra: Kontinuerlig hastighet, PCA-dos, klinikerbolus
- Taper**
Platåhastighet med valfri upptrappning/ nedtrappning vid början och slut av infusion
- Intermittert**
Specifik volym vid ett schemalagt intervall under en specificerad tid
- Kontinuerlig**
Konstant, programmerad hastighet
- Stegvis**
Stegvisa hastighetsökningar från en inledande hastighet till en maximal platåhastighet för en total volym

Den mångsidiga ambulatoriska pumpen CADD-Solis VIP är indikerad för infusioner intravenöst, intraarteriellt, subkutant, intraperitonealt, perineuralt, sårinfiltration, i epidurala eller subaraknoidala rummet, med fem olika leveranslägen.

Öka patientens självständighet

Hjälpskärmar med larm

Hjälpskärmar med pumplarm stödjer felsökning för att lösa larmtillstånd med guidade skärminstruktioner. Dessa skärmar kan bidra till att minska behovet av hembesök av sjukvårdspersonal samt bibehålla infusionens kontinuitet.



Exempel på hjälpskärmar med larm för högt tryck. Illustrationerna guidar patienten genom felsökningsprocessen

Differentierade larm

Larm som differentieras med hjälp av färg och signal med hög (röd), medel (gul) och låg (blå) prioritet




Högprioritetslarm

Medelprioritetslarm

Lågprioritetslarm

Rapporter i pumpen

Rapporter i pumpen visar trender om den aktuella infusionen.

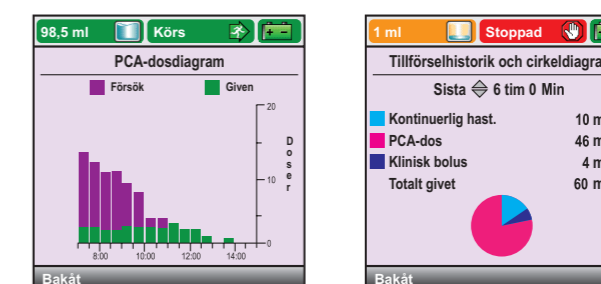

Skärm för dosrapport

Skärm för tillförselhistorik

CADD-Solis VIP ambulatoriska infusionssystem

Enklare för patienter och sjuksköterskor



Stöd dina patienters självständighet idag.

Ring +46 (0)8 594 772 50 eller besök www.icumed.com för mer information.

Produkten uppfyller gällande lagstiftning och har motsvarande CE-märkning.
Se tillverkarens bruksanvisning för ytterligare information och/eller säkerhetsåtgärder.

icumedical
human connections